

Instrucțiuni de utilizare

Dispozitiv de terapie prin compresie cu aer
Model: Aparat de drenaj limfatic cu 3 compartimente



Vă mulțumim pentru achiziționarea produsului nostru. Vă rugăm să citiți cu atenție manualul de instrucțiuni înainte de utilizare și să îl păstrați pentru referințe viitoare.



RoHS
Made in China



I Conținut

Precauții de siguranță	1
Întrebări frecvente	2-3
Denumirea componentelor	3-4
Rezolvarea problemelor	4
utilizând	4-6
Note după utilizare	6
Curățare și depozitare	6
Eliminare	7
Conținutul pachetului	7
Date tehnice	7

I Precauții

Alerte

- Persoanele cu oricare dintre următoarele afecțiuni sau care sunt sub tratament trebuie să consulte un medic înainte de a utiliza dispozitivul:
 - Utilizarea unui stimulator cardiac sau a altor dispozitive medicale care sunt susceptibile la interferențe electrice;
 - Durere în tumorile maligne;
 - Durere în bolile de inimă;
 - Neuropatie periferică severă sau disfuncție senzorială cauzată de diabet;
 - Nepotrivirea pentru masaj din cauza unei leziuni corporale;
- A nu se lăsa la îndemâna sugarilor, copiilor și persoanelor fără posibilitatea de utilizare independentă.
- Nu utilizați un alt adaptor de alimentare decât cel original.
- Nu zgâriați, deteriorați, îndoiți excesiv, trageți sau răsuciți cablul de alimentare al adaptorului de alimentare. În caz contrar, se pot produce incendii sau șocuri electrice.
- Utilizarea este interzisă dacă adaptorul de alimentare nu funcționează corect sau dacă ștecherul este slăbit.
- Nu conectați sau deconectați adaptorul de alimentare cu mâinile ude.
- Nu puneți controlerul într-o pătură sau nu utilizați dispozitivul la temperaturi ridicate.
- Este interzisă reconstruirea, dezasamblarea sau repararea dispozitivului fără permisiune.



Alerte

- Dacă nu vă simțiți bine, opriți imediat utilizarea dispozitivului. Nu îl utilizați din nou înainte de a consulta un medic.
- Nu-l utilizați în baie sau în alte locuri umede.
- Deconectați adaptorul de alimentare de la priză înainte de curățare și întreținere.
- Deconectați adaptorul de alimentare atunci când nu îl utilizați.
- Nu vă plimbați atunci când utilizați această unitate sau purtați învelișuri.

I Întrebări frecvente


Î.1: Cum face acest produs masaj?

R: Există 3+3 saci de aer în interior. Acestea vor fi umflate și dezumflate pentru a simula masarea și mângâierea țesuturilor, precum mâinile umane. Aceasta ne poate relaxa mușchii, poate îmbunătăți circulația sângelui și poate ameliora durerea.

Î.2: Câte moduri de masaj are dispozitivul și care este diferența dintre ele? R: Există 3 moduri de masaj,


Modul 1: Mod secvențial

În acest mod, manșoanele se vor umfla și dezumfla de jos în sus.

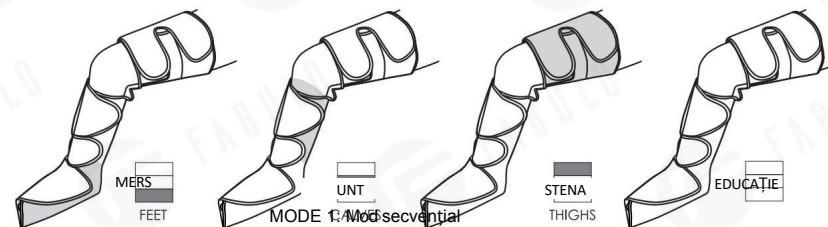

Modul 2: Modul de circulație,


În acest mod, manșoanele se vor umfla și dezumfla de jos în sus.

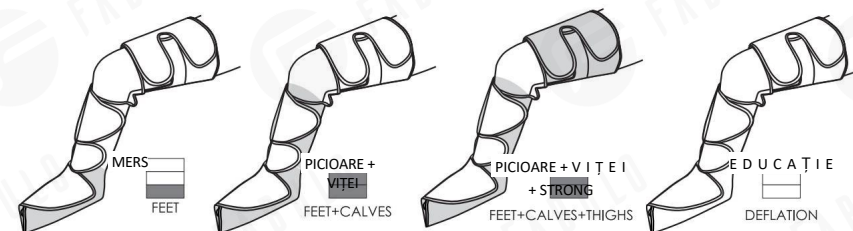

MODE 2 Mod ambele

Modul 3: Toate modurile,

În acest mod, manșoanele vor fi umflate și dezumflate simultan și complet.

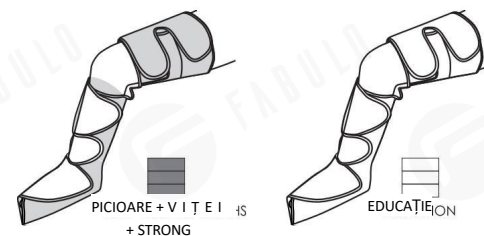

MODUL 3: Întregul Totul,

1
Î.3: Ce ar trebui să fac dacă simt că puterea de masaj este prea slabă sau prea puternică?
A 3: Există 3 niveluri de intensitate a masajului selectabile cu ajutorul controlerului, alegeți intensitatea care vi se potrivește. De asemenea, puteți regla intensitatea prin modificarea strângerii velcro-ului de pe înfășurări.

Q4: Ce ar trebui să fac dacă am viței mai mari? R 4: Pentru viței mai mari, utilizați accesoriile incluse pentru a extinde dimensiunea înfășurărilor.

Î5: Ce ar trebui să fac dacă am picioare mai mari?

Î5: Pentru picioare mai mari, tăiați cusăturile în partea de sus a degetelor de la picioare.

Î6: De ce nu funcționează când apăs butonul de pornire? R.6:

Asigurați-vă că ambele furtunuri de aer sunt introduse în driver, altfel nu va funcționa.

Î7: Cât timp ar trebui să-l folosesc?

A7: Vă recomandăm să utilizați de 1-2 ori pe zi timp de 20 de minute de fiecare dată. De asemenea, îl puteți utiliza pe termen lung dacă vă simțiți prea obosit sau doriți să continuați să vă bucurați.


Î8: De ce se încălzește șoferul?

A8: După cum sa spus, îl puteți utiliza timp de 20 de minute de fiecare dată. Dacă funcționează prea mult timp, controlerul se va încălzi, acesta este un fenomen normal.


Î9: De ce scoate un sunet șoferul?

A9: Sunetul provine de la o pompă de aer funcțională din șofer, care alimentează continuu cu aer airbagurile din învelișuri, acesta este un eveniment normal.

I Nume de componente

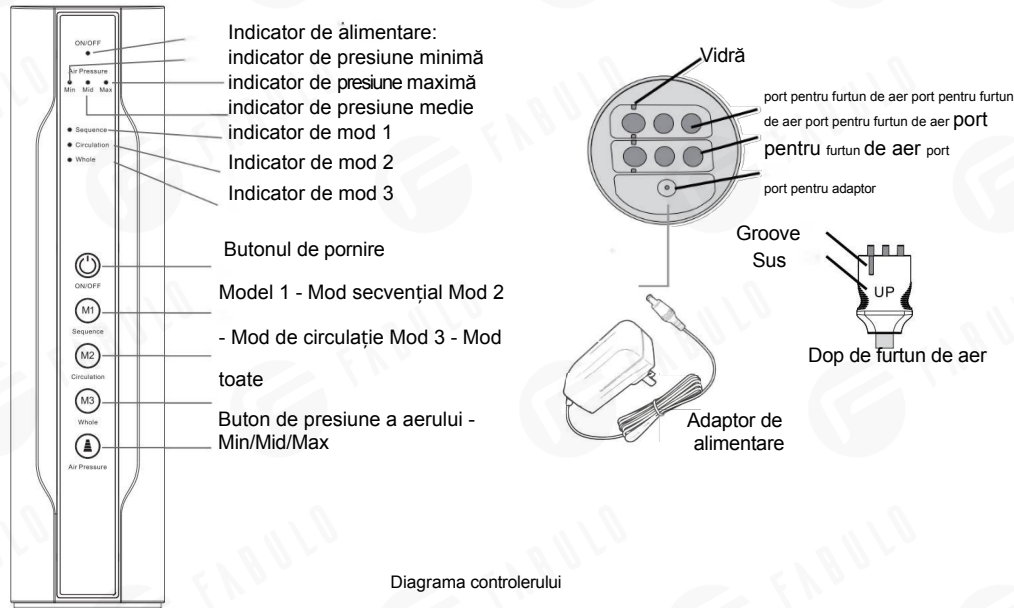

Previzualizare produs

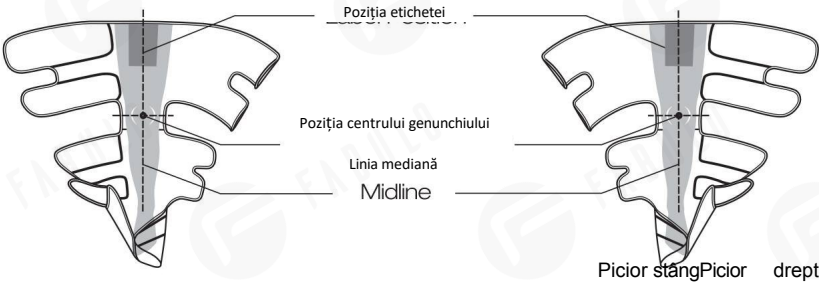

I Rezolvarea problemelor


Probleme	Cauze și soluții
1. Dispozitivul nu funcționează și indicatorul luminos nu este aprins	Asigurați-vă că adaptorul de alimentare este conectat corect și apăsați butonul de pornire de pe controler.
2. Dispozitivul nu funcționează, dar indicatorul luminos este aprins	1. Funcționează numai atunci când 2 aer sunt conectate la controler. 2. Verificați dacă furtunurile de aer sunt introduse corect (vezi semnul "UP").
3. Nu mai funcționează în timpul funcționării	1. Adaptorul de alimentare sau furtunurile de aer vor cădea; 2. Aparatul de masaj se oprește automat după 20 de minute; 3. Verificați dacă ambele furtunuri de aer sunt complet blocate.
4. Prea slab sau prea puternic	1. Puteți alege din trei niveluri de masaj; 2. Puteți ajusta lățimea înfășurării pentru a avea puterea corespunzătoare; 3. Dacă nu puteți tolera o astfel de forță, opriți dispozitivul.
5. Controlerul se încălzește.	Este normal ca controlerul să se încălzească după perioade lungi de utilizare. Vă recomandăm să îl opriți timp de 10 minute.

I Cerere:


Vă rugăm să citiți cu atenție precauțiile de siguranță înainte de utilizare. Pentru a obține un masaj mai bun, purtați corect manșoanele.

Folosiți banda stângă, ca în exemplul de mai jos:

1. Verificați instrucțiunile de pe etichetă și puneți-vă corect bandajele pe picioare.

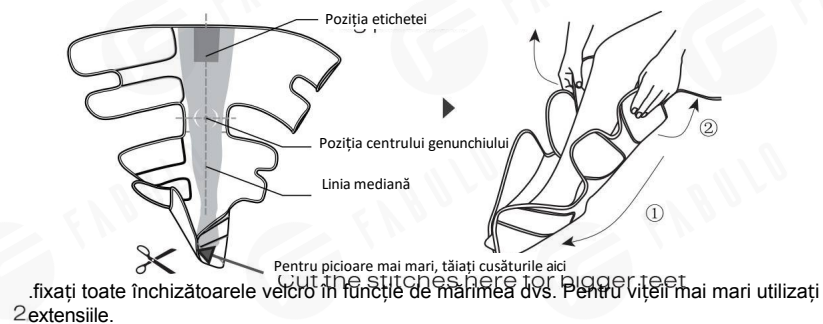

step1

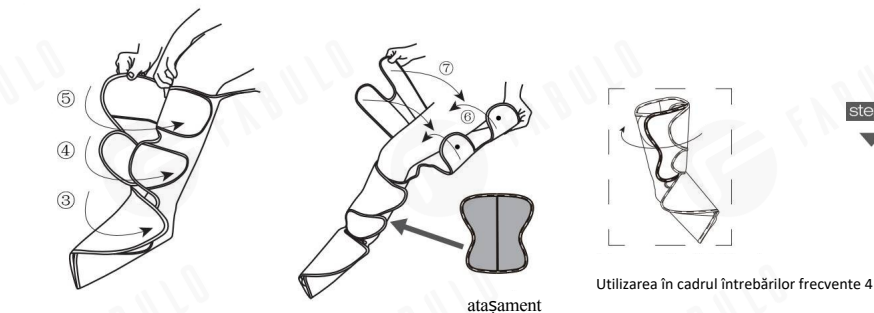

step2

3. Verificați și reglați poziția și etanșeitatea ca mai jos, nu împachetați prea strâns.



step3

4. Introduceți adaptorul de alimentare în controler și în mufa de pe fiecare parte.



step4

5. Introduceți corect și complet cele două dopuri de furtun în actuator.

.Insert two air hose plugs into the controller correctly and completely. Asigurați-vă că acestea sunt aliniate cu canelura. Respectați direcția "SUS".

step5



de minute.
După 20 de minute se va opri automat, dar îl puteți reporni.

6. Ridicați telecomanda și apăsați butonul "ON/OFF" pentru a porni unitatea.
• În mod implicit, acesta va începe cu modul 1 și forța 1 (cea mai mică).
• După 20 de minute se va opri (îl puteți reporni manual).

Indicator de alimentare step6



7. Selectați diferite moduri de masaj prin apăsarea butonului "M1"/"M2"/"M3", diferența dintre aceste 3 moduri poate fi văzută la pagina 2.

Indicatori de mod



step7

8. Apăsați butonul "Presiune aer" pentru a selecta intensitatea.
1) Trei niveluri de presiune la alegere. Vă recomandăm să utilizați cel mai scăzut nivel la început.
2) Puteți ajusta strânsoarea înfășurării pentru a obține rezistența corespunzătoare;

Indicator de presiune



step8


9. Apăsați butonul "ON/OFF" pentru a-l opri.



step9

| Note după utilizare

1. Deconectați adaptorul de alimentare de la priză.

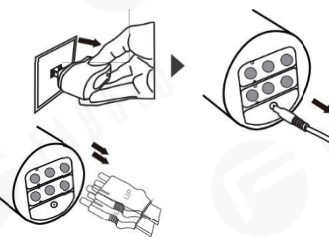

2. Scoateți fișele adaptorului de alimentare și furtunurile de aer din partea de jos a controlerului.

3. Îndepărtați ambalajele, împăturiți-le într-o pungă sau cutie de depozitare.



step12

| Curățare

Nu uitați să opriți alimentarea atunci când curățați unitatea.

1. În caz de murdărie, ștergeți actuatorul, ambalajul și furtunurile cu o cârpă moale umezită cu soluție de săpun.
2. Nu utilizați benzină, alcool, diluant sau alte lichide iritante pentru a șterge instrumentul, în caz contrar, se vor produce defecțiuni sau componentele vor fi deteriorate sau decolorate.
3. Nu permiteți pătrunderea obiectelor străine în furtunuri.
4. Scobitorile de dinți pot fi utilizate pentru a îndepărta firele de păr sau decupajele atașate la închizători Velcro.

I Depozitare

- A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
- Nu dezamblați singur acest produs.
- Nu îl plasați într-un mediu cu temperatură și umiditate ridicate.
- Nu expuneți la lumina directă a soarelui.
- Evitați perforarea airbagurilor și a furtunurilor cu ace.
- Nu puneți lucruri grele pe el.




I Eliminare

Atunci când eliminați deșeurile, respectați reglementările locale.

I Conținutul pachetului:

- 2 x înfășurări pentru picioare și picioare - 2 x extensii
- 1 x controler de mână - 1 x adaptor de alimentare / DC12V1A
- 1 x Manual de utilizare.
- 1 x sac de depozitare portabil

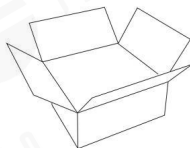

I Date tehnice:

Model	Aparat de drenaj limfatic cu 3 compartimente
Nume	Echipament de terapie prin compresie cu aer
Adaptor AC/DC	Intrare AC: 100-240 volți, AC 50/60Hz, ieșire DC: 12V 1A
Putere nominală	12W
Condiții de funcționare	Temperatură: +5°C la 40°C (41°F la 104°F) Umiditate: 1% la 90% fără condensare Presiune atmosferică: 70 kPa la 106 kPa
Condiții de depozitare	Temperatură: -20°C la 55°C Umiditate: 5% la 90% fără condensare Presiune atmosferică: 50 kPa la 106 kPa Păstrați uscat și nu expuneți la lumina directă a soarelui.
Timing	20 de minute