



Dispozitiv cosmetic AM 60 - Microdermabraziune

Prefață

Dermabraziunea cu microcristale a fost propusă pentru prima dată de Mattioli din Florența, Italia, și are o istorie de peste 20 de ani. Acest tip de tehnologie a fost furnizat doar dermatologilor și medicilor în primele sale utilizări, dar treptat, a început să fie utilizat de casele spa și saloanele de înfrumusețare, fiind salutat ca fiind cea mai bună metodă de înfrumusețare medicală. Această metodă a fost dezvoltată cu succes în Europa timp de mai mulți ani, tratând mii de pacienți și având un efect extrem de satisfăcător.

Acum dorim să vă prezentăm **dermabraziunea cu diamante**, care este o îmbunătățire creativă a dermabraziunii cu microcristale. Dermabraziunea cu diamante oferă o procedură non-chirurgicală de resurfacing al pielii, folosind capete de diamante sterile pentru a abradă sau abradă stratul superior al pielii și apoi aspira particulele înapoi împreună cu toate resturile și pielea moartă.

Această procedură îndepărtează reziduurile de piele, imperfecțiunile, petele, ridurile și pigmentarea nedorită de pe piele. Utilizarea consecventă a dermabraziunii cu diamante, împreună cu produsele pentru piele care pătrund prin stratul superior al pielii până la nivelul dermei, ajută la refacerea nutrienților naturali, la restabilirea activității celulare și la promovarea sănătății pielii. Rezultatul după un tratament de microdermabraziune este, de obicei, o piele sănătoasă, strălucitoare și frumoasă.

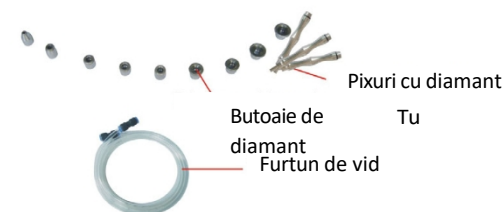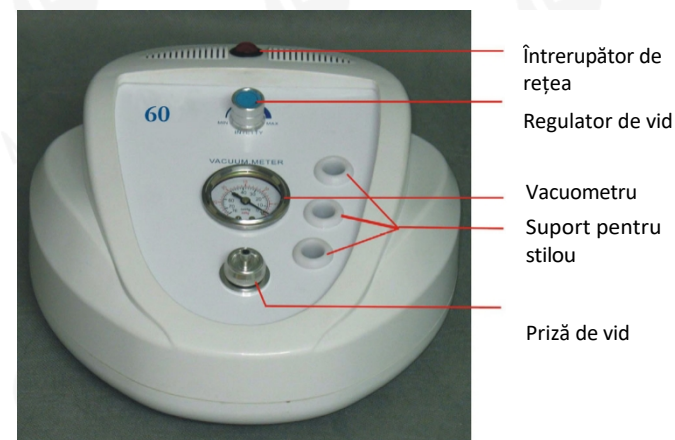

*** Pregătirea pentru pretratare

1. Consultația include o examinare a pielii, un plan de tratament.
2. Operatorul trebuie să utilizeze mănuși de vinil și o mască facială.
3. Pentru pielea grasă sau predispusă la acnee, se poate utiliza un aparat de aburi înainte de tratament sau se poate aplica o loțiune degresantă înainte de curățare.
4. Curățați pielea cu gel de curățare sau apă, apoi ștergeți cu un tampon de bumbac. Lăsați pielea să se usuce.

Instrucțiuni de utilizare pentru dermabraziune cu diamant

1. Împingeți inelul mobil al duzei de cupru de pe prelungitor și scoateți furtunul de aspirare 6x4. Apoi împingeți inelul din plastic negru de pe furtunul de aspirare.
2. Aplicați o picătură de smântână sau lapte pe duza furtunului de aspirare, împingeți inelul mobil și împingeți furtunul de aspirare.
3. Introduceți tamponul de bumbac în capul diamantat și apoi atașați capul diamantat la mâner. Îndepărtați tamponul de vată după fiecare tratament.
4. Porniți întrerupătorul principal.
5. Reglați intensitatea vidului cu controlerul de vid în conformitate cu următorul tabel de referință, intensitatea va fi afișată pe indicatorul de vid și verificați confortul clientului.

Intensitatea de vid recomandată pe suprafața tratată

Zona de tratament	Piele normală (inHg)	Piele sensibilă (inHg)
Față	12-22	8-12
Antet	12-22	10-12
Piept	15-20	15-18
Nas	10-15	10-14
Krk	18-18	10-15
Zona ochilor	8-12	8-10

Tabel cu programul de tratament




Tratament	Frecvența (zile)	Numărul total de Vizită
Peeling facial	6-10	3-5
Linii fine	7-13	6-8
Krk	12-14	3-5
Cicatrici de acnee	7-12	8-10
Hiperpigmentare	7-12	8-10

6. Folosiți zona înclinată a atașamentului pentru a intra în contact cu suprafața pielii. Continuați cu o mișcare de alunecare lentă. Nu țineți accesoriul într-un singur loc prea mult timp, deoarece acest lucru va deteriora pielea.
7. Reglați încet debitul de cristal folosind regulatorul de vid de la minim la maxim. În timpul utilizării normale, nu reglați debitul la maxim decât dacă este necesar. Acest lucru este pentru o mai bună

intensitatea confortului.

8. Întindeți ușor pielea cu degetul mare și degetele și glisați atașamentul peste zona de tratament de 2-3 ori. Apoi treceți din nou în direcții diferite pentru a evita liniile striative, ca în imaginea de referință. Se pot utiliza mișcări de periere sau de lustruire pe diferite zone.

**DIAGRAMA MIȘCĂRILOR ȘI ZONELOR
SUGERATE PENTRU DERMABRAZIUNE**

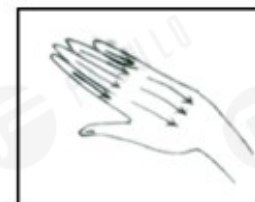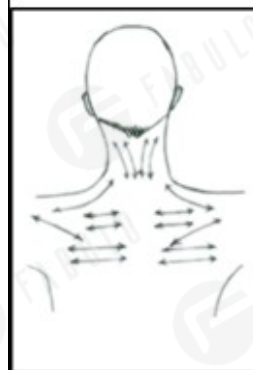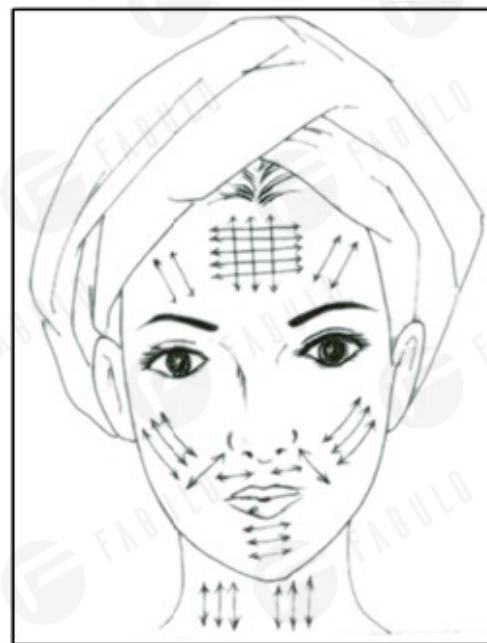

*** Urmați direcția săgeților.**

9. După tratament, îndepărtați orice piele moartă rămasă cu o perie moale și clătiți cu un burete umed sau un prosop rece umed.

10. Lăsați pielea să se usuce și apoi aplicați produsul de îngrijire a pielii dorit.

11. Pentru a curăța capul diamantat, utilizați o periuță de dinți sau un tampon de bumbac umezit cu puțin alcool pentru a șterge murdăria, apoi utilizați lumina UV sau temperatura ridicată pentru sterilizare.

Avertisment de siguranță

Avertisment important înainte de a utiliza acest dispozitiv:

Nu utilizați niciodată acest dispozitiv pe o persoană care are sau suferă de următoarele afecțiuni medicale descrise mai jos. (Salonul sau operatorul poate lua în considerare posibilitatea de a cere clientului să semneze o declarație de renunțare care să ateste că nu are nicio afecțiune medicală gravă).

1. Boli cardiace
2. Murmur cardiac sau bătăi neregulate ale inimii
3. Are un stimulator cardiac sau alt tip de egalizator al cardiac.
4. Sarcina
5. Epilepsia
6. Alcoolismul
7. Vredy
8. Boli ale stomacului, intestinelor, ficatului sau pancreasului.
9. Cancerul de sân.
10. Tratament continuu pentru orice formă de cancer.

11. El a suferit majoră anul trecut.

12. Astmul

13. Răceală, gripă sau stomac deranjat

14. Orice boală sau afecțiune gravă care nu este menționată mai sus.

Nu utilizați în următoarele zone:

1. Piele sensibilă
2. Erupecie cutanată
3. Piele deteriorată, inflamată sau infectată.
4. O cicatrice chirurgicală care nu este mai veche de 12 luni.
5. Piele umflată.
6. Sondele nu pot fi direcționate în globul ocular.
7. Organe sexuale.

1. Întotdeauna începeți tratamentul cu atenție și observați efectele asupra atingerii și aspectului pielii. O putere de vid prea mare sau prea mare poate provoca o reacție inflamatorie.
2. Edemul și eritemul pot apărea după tratament, dar acestea vor dispărea în câteva ore.
3. Tehnicile prea agresive pot provoca o ușoară în următoarele 3-4 zile. Epiderma care este tratată prea agresiv poate duce la sângerări în dermul superficial.
4. Dermabraziunea cu diamant nu trebuie utilizată pe zone sensibile, cum ar fi pleoapele. Pleoapele trebuie să fie întotdeauna închise în timpul procedurii și pot fi acoperite cu tampoane de bumbac umede.
5. Următoarele zone sunt considerate nepotrivite pentru tratament: Tumori cutanate, semne din naștere, angiom, buze, ochi, herpes, cancer de piele și pete hepatice.

6. Nu modificați sau nu încercați să reparați unitatea, contactați un tehnician pentru întreținere.

Rezolvarea problemelor

Dacă instrumentul nu funcționează , efectuați următoarele proceduri înainte de a solicita întreținere.

1. Putere de aspirație scăzută / presiune de vid scăzută:

Verificați din nou dacă furtunul de vid este bine conectat la priză și apoi la atașament. Apoi rotiți regulatorul de vid la maxim și apoi porniți dermabraziunea cu diamant și apoi folosiți degetul pentru a bloca orificiul de pe atașament. În mod normal, vacuummetrul poate măsura 24 inch Hg.

**** Verificați inelul O din buzele diamantului și inelul O din soclu!**

Dacă nu reușiți să rezolvați problema, vă rugăm să contactați distribuitorul dumneavoastră. Nu deschideți singur unitatea fără instrucțiuni de la un tehnician.

2. Niciun răspuns atunci când este pornită.

Vă rugăm să înlocuiți siguranța. Și conectați corect cablul de alimentare.

Dacă nu puteți rezolva problema, vă rugăm să contactați distribuitorul.

Nevoi și accesorii

Dispozitiv de dermabraziune cu diamant x 1

Furtun de vid din PVC 6*4 x 1 Stilou cu diamant x 2

Pix și cutie de spumă x1 Cap

de diamant x 9 Cap și cutie de spumă 1 O-ring x 2

Filtru de bumbac x 1 pachet

Cablul de alimentare x 1

Siguranță x2

Manual x 1

Date tehnice:

Alimentare: 240V/50/60Hz

220V/50/60Hz

115V/60Hz

Putere: 65 VA Siguranță: 2A